


Guía de activación e instalación de MestReNova

La presente guía se refiere a la instalación y activación de MestReNova LITE CDE (MNova) con la licencia de la UCLM.

Necesitamos tener **activa previamente la cuenta de ChemOffice** para acceder a la descarga y solicitud de la licencia. Si no es así, en la parte inicial de las instrucciones de instalación y activación de ChemOffice están indicados los pasos a seguir.

Accedemos a la siguiente dirección desde nuestro navegador web para iniciar el proceso, y hacemos login con el usuario y contraseña que hemos creado previamente para la descarga y activación de ChemOffice:

<https://perkinelmerinformatics.flexnetoperations.com>

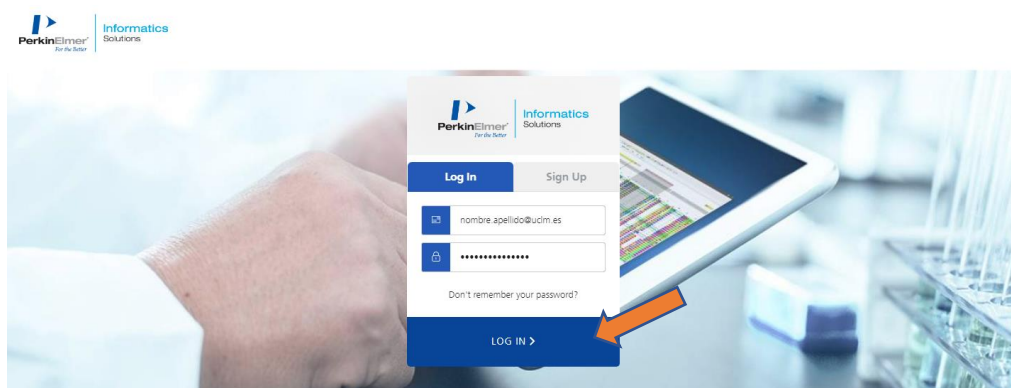

Ahora el navegador nos mostrará las licencias de uso a las que tenemos acceso (**Entitlements**), si no es así, hacemos clic en **List Entitlements** (en la parte izquierda, bajo **Activation & Entitlements**). Aquí debemos **copiar o apuntar el código** bajo **Entitlement ID** (con formato **ORDxxxxx**), ya que lo necesitaremos más adelante, y hacer clic en **Download Now**, a la derecha del todo en la tabla.

ChemDraw/ChemOffice Users

Activation Code corresponds to the product in the row they are in

Entitlement ID	Product	Quantity_Purchased	Start Date	Expiration	Maintenance	Product_Activation	Downloads
ORDxxxxx	ChemOffice+ Cloud Standard/Signals Notebook Bundle. Subscription, includes Suppo...	1	Sep 22, 2022	Sep 21, 2023		XXX-XXX-XXX-XXX	Download Now

En la siguiente página, hacemos clic en **ChemOffice+ Cloud Standard SNB Standard Bundle**.

Download Order

Product Activation Code: **XXXX-XXXX-XXXX-XXXX**

Product: ChemOffice Cloud Standard/Signals Notebook Bundle. Subscription, includes Suppo..

Version	Download Package	Last Update
21.0	ChemOffice + Cloud Standard SNB Standard Bundle	Feb 24, 2022
	Quick Start Guide – Open Me First (ChemOffice+ Cloud Standard) R1	Feb 24, 2022

Una vez en la lista de ficheros disponibles, descargamos el instalador de MNova haciendo clic en **MestReNova-LITE-CDE-12.0.1-20212.msi**, a la derecha de **Mnova ChemDraw Edition ? WIN**.

Mientras se descarga el instalador, vamos al final del párrafo superior y hacemos clic en **Webform** para solicitar desde aquí la licencia de MNova.

Downloads

ChemOffice+ CLD STD SNB 21.0

You may not need to activate!
If prompted for an activation code, please do the following:

- Click [here](#) to navigate back to the List Entitlement page and Copy the activation code.
- This Product Activation code will activate both WIN & MAC platforms.

To receive your License ID for Mnova software, complete the [Webform](#) or send an email to support@mestrelab.com.

File Description	File Size	File Added	File Name
PC Windows Installer for ChemOffice+ Cloud Standard	634.52MB	Feb 24, 2022	cos21.0.0.exe
Mac OSX Installer for ChemDraw Professional	191.18MB	Feb 08, 2022	cd21.0.0.dmg
ChemDraw ChemOffice 21 Tips & Tricks	109.38MB	Feb 23, 2022	ChemDraw ChemOffice 21 Tips & Tricks.zip
ChemOffice/ChemDraw Product Activation User Guide	1.04MB	Feb 15, 2022	Product Activation User Guide.pdf
ChemOffice/ChemDraw Product User Guide	18.25MB	Feb 15, 2022	ChemDraw v21.0 Product User Guides.zip
ChemOffice/ChemDraw Product User Guide Japanese	10.12MB	Jun 03, 2022	ChemDraw v21.0 User Guide Japanese.pdf
ChemOffice/ChemDraw 21.0 Release Notes	661.16KB	Feb 08, 2022	ChemOffice v21.0 Release Notes.pdf
ChemOffice/ChemDraw 21.0 Hardware/Software Guide	276.55KB	Feb 08, 2022	DT-21.0 Hardware Software Guide.pdf
Mnova ChemDraw Edition ? WIN	161.05MB	Aug 05, 2021	MestReNova-LITE-CDE-12.0.1-20212.msi
Mnova ChemDraw Edition ? MAC	86.93MB	Aug 05, 2021	MestReNova-LITE-CDE-12.0.1-20212.dmg
Mnova Lite CDE User Manual	6.04MB	Aug 05, 2021	MestReNova-Lite CDE_Manual.pdf

Ahora, en la página de Mestrelab Research que se ha abierto en el navegador, rellenamos el formulario con **nombre, apellidos, email de la UCLM, y el ID con formato ORDxxxxx** que apuntamos en un paso anterior.

Marcamos la opción **Yes, I accept** para aceptar el acuerdo de términos y condiciones, y hacemos clic finalmente en **SEND NOW**.

Completado y enviado el formulario, nos llegará un email al buzón de la UCLM con el **ID de licencia de MNova**, como se muestra en esta captura. Copiamos ese código.

De: noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com> En nombre de Mestrelab Support
 Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2022 15:40
 Para: [@uclm.es](mailto:uclm.es)
 Asunto: Mnova Lite ChemDraw Edition License

No suele recibir correos electrónicos de support@mestrelab.com. Por qué esto es importante

If you can't see this email properly click on the view images of your email-client

Hi ,

Welcome to Mnova!

You are receiving this email because you have an annual free license of Mnova Lite ChemDraw Edition, a tool for chemist to quickly review their 1D NMR data, with your ChemDraw purchase.

Your license is available. Please use this License ID to start with Mnova:


- Your License ID is: **a0DAX000**

If you need more functionalities, upgrade to the full Mnova NMR to handle 2D data, to generate publication quality reports with one click, stacked spectra, automatically assign your NMRs and much more [here](#).


Yours faithfully,

Support Team


Ahora ya podemos ejecutar el instalador que hemos descargado (**MestReNova-LITE-CDE-12.0.1-20212.msi**), siguiendo los pasos del asistente.

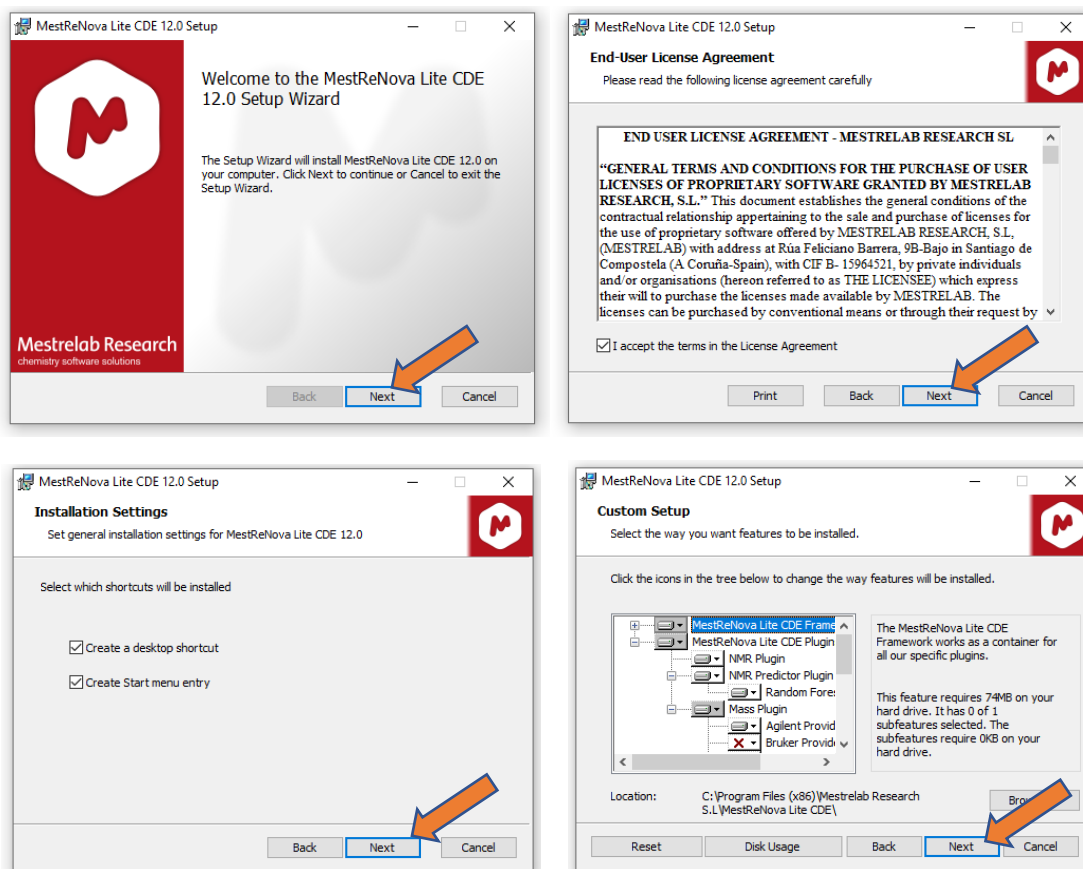


Llegados a este punto, si no tenemos instalado el complemento conector de Shimadzu nos aparecerá un error indicándolo. Podemos marcar la opción **Let me proceed anyway** para continuar sin instalar el complemento, o en caso contrario, nos desplazamos por la lista hasta **Shimadzu Redistributable**, hacemos clic en el elemento, y luego en **Will be installed on local hard drive** (Puede además se necesite alguna librería adicional, que habrá que descargar e instalar desde la web de Microsoft).

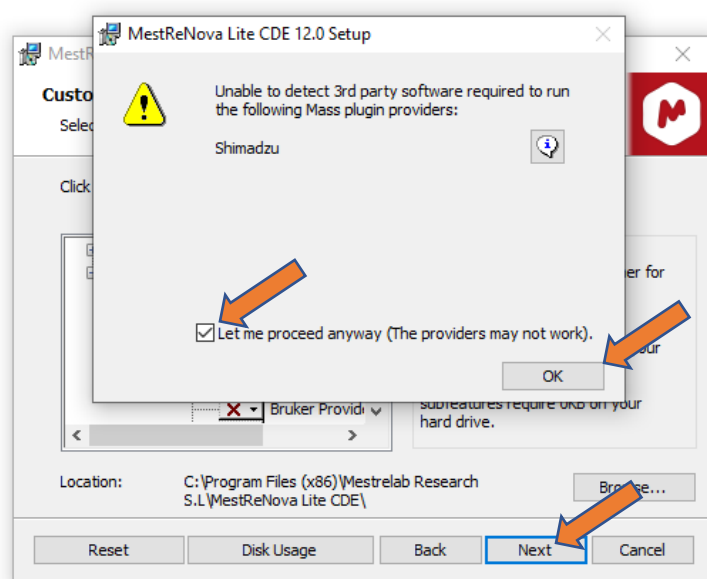


En el último paso el asistente nos pedirá que hagamos clic en **Install** para completar el proceso, y finalmente en **Finish** para salir de la instalación ya terminada.

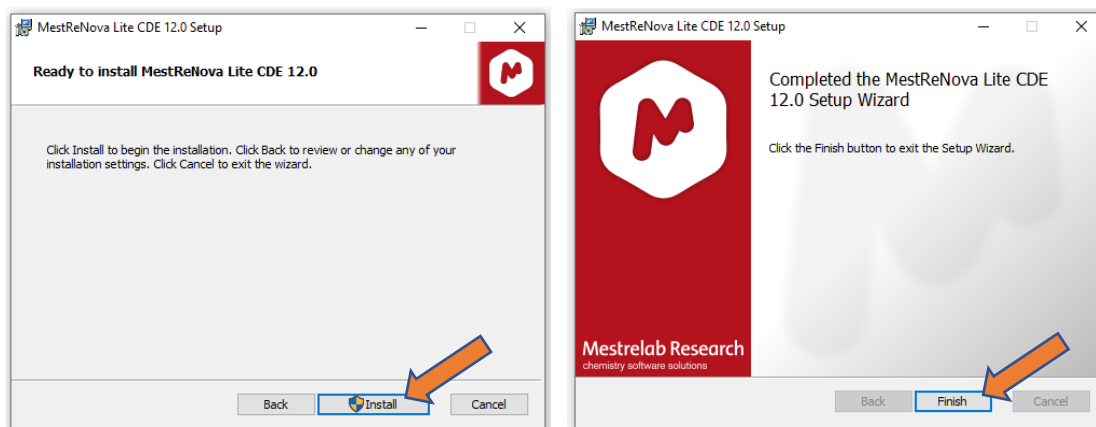

Al iniciar la aplicación **MestReNova Lite CDE**, la primera vez nos pedirá introducir el ID de licencia y nuestro nombre de usuario. **Escribimos o pegamos el ID** que recibimos en el email anteriormente y nuestra **dirección de correo de la UCLM**, y hacemos clic en **OK** para activar y poder utilizar la aplicación.

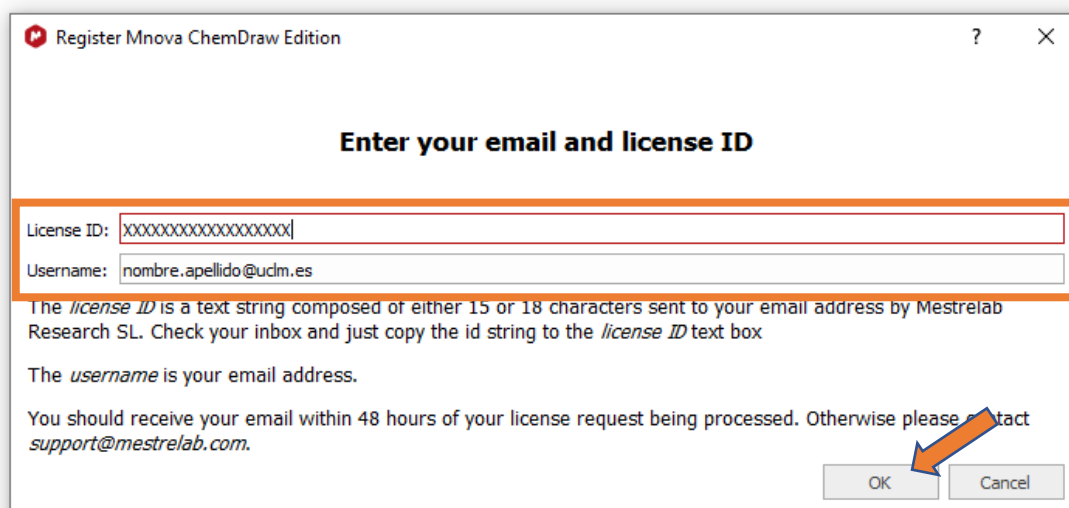

Si posteriormente necesitamos desactivar la licencia para utilizarla en otro equipo, dentro de la aplicación hacemos **doble clic en el icono del check** de la parte inferior derecha de la ventana, junto a **Licencias**.

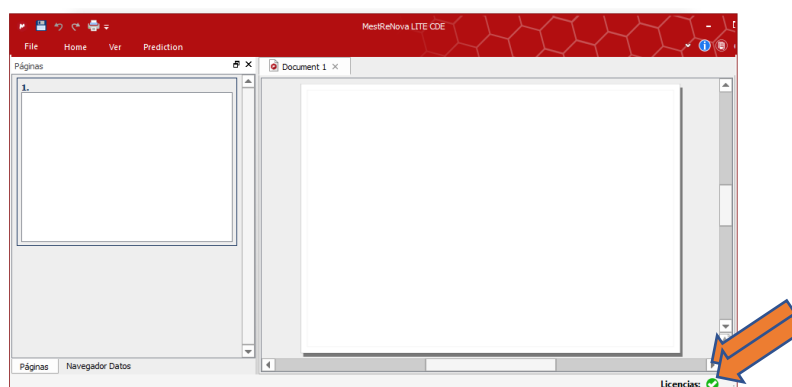

En la nueva ventana que aparecerá, **marcamos en la lista la licencia** que queremos eliminar, y después hacemos clic en el botón – (**menos**) de la parte inferior derecha. Cuando nos pida confirmación, hacemos clic en el botón **Yes**, quedando la licencia liberada para su utilización en otro equipo distinto.

